

# Mode d'emploi

## - AMPLIFICATEUR -



## Remarques générales

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez à lire impérativement ce qui suit.

Conservez ce document dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le fablab Coh@bit.

## Précaution d'emploi

⚠ L'Amplificator et les piles peuvent être dangereuses si elles sont avalées ou utilisées à mauvais escient. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, appelez le numéro d'urgence local ou contactez immédiatement votre hôpital.

⚠ Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau.

⚠ Tenir l'Amplificator hors des flammes.

⚠ Veillez à surveiller l'utilisation de l'Amplificator dans les mains d'enfants en bas âge.

Contactez le fablab Coh@bit si l'aide auditive dysfonctionne ou pour toutes questions à propos de l'Amplificator.

# SOMMAIRE

<b>1. Quésaco Amplificator.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Composants de l'Amplificator.....</b>	<b>5</b>
2.1. Casque audio.....	5
2.2. Parabole et Pistolet.....	5
2.3. Boitier.....	6
2.4. Alimentation.....	6
<b>3. Guide d'utilisation de l'aide auditive.....</b>	<b>7</b>

# 1. Quésaco Amplificator

L'Amplificator est une invention de loupes d'oreilles aux capacités surprenantes.

Entre prothèse poétique et véritable objet technique, un pistolet pour mieux s'entendre.




## 2. Composants

### 2.1. Casque audio



L'Amplificator est composé d'un casque audio filaire. Celui-ci est à mettre sur les oreilles.

### 2.2. Parabole et Pistolet

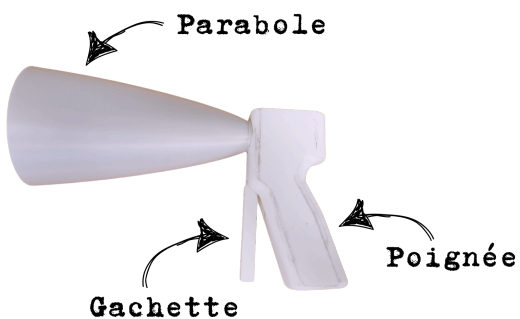


L'Amplificator est composé d'une parabole tenue grâce à une poignée. Cette parabole permet de cibler une sonorité.



## 2. Composants

### 2.3. Boîtier

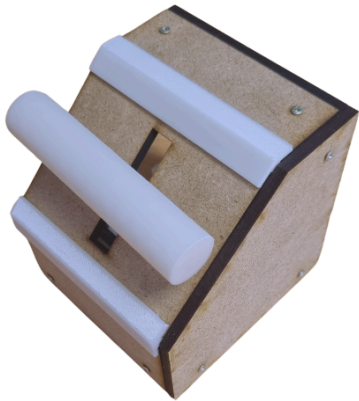

- L'Amplificator est composé d'un boîtier dans lequel se trouve la pile, la carte électronique et on y trouve le levier, la prise jack et le bouton d'allumage.
- Le levier permet de régler le volume sonore. (vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer)
- La prise jack permet de brancher le casque au système.
- Le bouton d'allumage sert à allumer l'Amplificator.

### 2.4. Alimentation



L'alimentation de l'Amplificator est une pile 9V. Pour accéder à la pile de 9V, démontez le cache situé sur la face gauche du boîtier (la face avant est celle avec la poignée).

### 3. Guide d'utilisation de l'aide auditive

Étape 1: Allumer l'Amplificator grâce au bouton situé sur la face arrière du boîtier.

Étape 2: Placer le levier du boîtier tout en bas afin de protéger vos oreilles d'un volume trop fort lorsque vous mettrez le casque.

Étape 3: Mettre le casque sur ses oreilles.

Étape 4: Régler le son avec le levier : pour augmenter, montez le levier situé sur le boîtier.

Étape 5: Pointer la parabole vers ce que vous souhaitez entendre.

Étape 6: Profiter pleinement de cette expérience auditive et laisser place à la créativité.

Étape 7: Éteindre l'appareil une fois l'utilisation terminée en appuyant sur le bouton.







Village  
TERRE-NÈGRE

COH@BIT  
fablab €



Gironde  
LE DÉPARTEMENT